



SOUNDWORLD
solutions™



BLUETOOTH *SERIES*

CS50

**PERSONAL
SOUND
AMPLIFIER**

**GUÍA DEL
USUARIO**

GRACIAS

Gracias por comprar el CS50.

Este Amplificador de Sonido Personal Bluetooth ofrece una gran flexibilidad y personalización

en términos de ajuste y configuración de sonido, permitiéndole escuchar mejor en situaciones como reuniones de negocios y familiares.



Visite nuestro sitio web y registre su CS50 para recibir actualizaciones importantes, información acerca de nuevos productos y ofertas exclusivas.

CONTENIDO

Primeros pasos	4
Audífono	5
Kit de carga	6
<i>Cómo cargar las baterías</i>	6
Cómo usar su CS50	8
<i>Ajuste personal</i>	8
<i>Cómo conectar una batería al CS50</i>	9
<i>Cómo colocar el CS50 en su oreja</i>	10
<i>Cómo ajustar el volumen</i>	10
<i>Cómo seleccionar un ajuste ambiental</i>	11
<i>Cómo cambiar su perfil base</i>	11
<i>Cómo acostumbrarse a su CS50</i>	13
<i>Cómo emparejar dispositivos Bluetooth</i>	14
<i>Cómo contestar llamadas telefónicas</i>	15
<i>Transmisión de audio continua (streaming)</i>	16
<i>Personalización avanzada</i>	17
Cuidado y limpieza	18
Apéndice	19
<i>Solución de problemas</i>	19
<i>Garantía limitada de un año</i>	20
<i>Información importante</i>	23

PRIMEROS PASOS

Su Amplificador de Sonido Personal Bluetooth CS50 incluye las siguientes piezas:



- Audífono CS50



- Dos baterías recargables



- Kit de carga de baterías



- Tres puntas para audífono (pequeña, mediana, grande)



- Herramienta para limpieza del audífono



- Estuche para transporte

AUDÍFONO

La terminal de la batería

tiene conectores magnéticos para una instalación fácil y rápida de la batería.

El cable de la batería

en el tubo ajustable proporciona un ajuste cómodo sin importar el tamaño de la oreja.

La boquilla

proporciona una base segura para montar las puntas del audífono.

El botón de programa

ubicado en el borde trasero del audífono alterna entre tres ajustes ambientales.

El botón de volumen

ubicado en la parte frontal del audífono permite al usuario aumentar o disminuir el nivel en incrementos de 3 dB.

Micrófono direccional

para calidad de audio mejorada durante las llamadas telefónicas.

La punta del audífono

se ajusta a su oído como un audífono estándar. La punta de audífono más pequeña viene preacoplada al CS50.

KIT DE CARGA

Fuente de alimentación del cargador
(tomacorriente de pared)



La base del cargador
tiene dos estaciones de carga de baterías con indicadores luminosos LED independientes.



Cable cargador
micro-USB a USB

Cómo cargar las baterías

Aunque las baterías pueden tener un poco de carga al desempaquetarlas, le recomendamos cargarlas totalmente antes de comenzar a usar su CS50. Las baterías tardarán en cargarse totalmente hasta 2 ½ horas. Una batería completamente cargada alimentará al CS50 hasta por 15 horas de escucha normal.

Para cargar las baterías:

1. Ensamble el kit de carga conectando el extremo pequeño del cable en la base del cargador, y conecte el extremo grande en la fuente de alimentación del cargador.



Nota: El extremo grande del cable de carga también puede conectarse a un conector USB estándar en su computadora.

2. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente alterna (CA) estándar. Las luces en la parte superior del cargador se iluminarán en color azul para confirmar que las estaciones de carga reciben energía.
3. Conecte las baterías a los dos puntos de carga en el cargador alineando los imanes. Una vez que la batería esté colocada en su lugar, la luz indicadora cambiará de color. Una luz roja indica que la batería se está cargando. La luz se volverá verde cuando la batería esté totalmente cargada y lista para usarse.



ADVERTENCIA - Campo magnético

Puede ser nocivo para usuarios de marcapasos y desfibriladores. No coloque el audífono CS50 o las baterías en un bolsillo de su camisa o cerca de su marcapasos o desfibrilador.

CÓMO USAR SU CS50

Ajuste personal


1. El CS50 incluye tres puntas de audífono de diferente tamaño: pequeña (preacoplado a la boquilla del audífono), mediana y grande. Si la punta pequeña no está ajustada en su oído, quite la punta del audífono de la boquilla e intente con la punta media o grande.



Los moldes de los audífonos que vienen con su CS50, pueden ser recortados para un ajuste más cómodo.

Utilice unas tijeras para recortarlos en las guías marcadas antes de unirlos al conector del CS50.

Recorte en pequeños incrementos para lograr un ajuste perfecto.

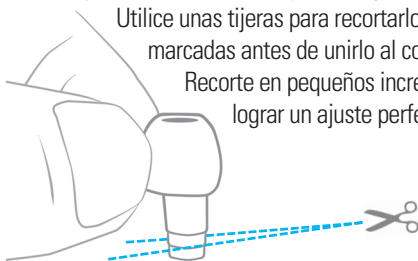

2. Deslice la punta del audífono totalmente sobre la boquilla del audífono. El extremo de la funda debe entrar en contacto con la base de la boquilla.

Nota: No use el audífono sin acoplar una punta de audífono.

3. El cable de la batería puede ajustarse para maximizar la comodidad de su CS50. Tomando el cuerpo del audífono en una mano, jale o empuje cuidadosamente el cable de



1 Tome el cuerpo del aparato en una mano.

2 Jale o empuje suavemente el cable con su otra mano para obtener la longitud deseada

la batería con su otra mano para lograr la longitud deseada. Cuide de no jalar con demasiada fuerza.




Cómo conectar una batería al CS50

1. Alinee los contactos y los imanes de una batería cargada con las terminales de batería e imanes en el audífono.
2. Una vez que la batería se ajuste en su lugar, la unidad estará encendida. Es normal tener un ligero retraso de unos cuantos segundos mientras la unidad se enciende. Para apagar la unidad, sólo desconecte la batería.
3. El CS50 proporciona una indicación sonora de batería baja. Cuando escuche cinco tonos reproducidos en secuencia (bajo, alto, bajo, alto, bajo) es momento de cambiar las baterías.

CÓMO USAR SU CS50

Cómo colocar el CS50 en su oreja

1. Coloque la batería detrás de su oreja, dejando colgado el cable de la batería sobre su oreja.
2. Si utiliza anteojos, coloque la batería entre la pata de sus anteojos y su oreja. Tome en cuenta que quitar o ajustar sus anteojos podría crear un ruido distractor en su CS50.
3. Inserte la punta del audífono con cuidado y en forma recta dentro de su oído, moviéndola ligeramente para asegurar un buen ajuste. El ajuste ideal debe ser ajustado al oído, pero no apretado.

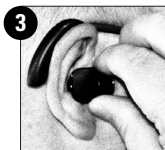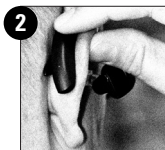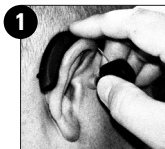

Cómo ajustar el volumen

Presione el botón de volumen para aumentar el volumen. Escuchará cuatro tonos cada vez más agudos para indicar el nuevo nivel. Cuando alcance el volumen máximo, el último tono en la serie descenderá. Mantenga presionado el botón de volumen para disminuir el volumen. Escuchará cuatro tonos cada vez más graves para indicar el nuevo nivel.

Cómo seleccionar un ajuste ambiental

El botón de programa ubicado en el borde trasero de su CS50 puede usarse para alternar entre tres ajustes ambientales. El primer ajuste es su perfil de escucha base. Este ajuste es para situaciones normales, relativamente silenciosas. Escuchará un sonido de confirmación al regresar a su perfil base.

Nota: Al primer uso, el perfil base de su CS50 está ajustado de fábrica con la “Opción predeterminada 1”. Para cambiar su perfil base, vaya a la página 38.

Los otros dos ajustes están diseñados para optimizar el desempeño del CS50 en situaciones específicas.

Modo de restaurante – Escuchará dos sonidos de confirmación rápidos al entrar al Modo de restaurante del CS50. El Modo de restaurante enfatiza el micrófono direccional para enfocarse en los sonidos provenientes frente a usted y proporciona un mayor rechazo de sonidos no deseados en ambientes ruidosos.

Modo de entretenimiento – Escuchará tres sonidos de confirmación rápidos al entrar al Modo de entretenimiento del CS50. El Modo de entretenimiento proporciona una respuesta de baja frecuencia para un sonido más natural en eventos musicales o teatrales.

Cómo cambiar su perfil base

El CS50 viene programado con tres perfiles de escucha predeterminados con respuestas de frecuencia conformadas con base en las necesidades de amplificación más típicas. Cada perfil predeterminado tiene ajustes de nivel automáticos para maximizar la comodidad y capacidad de audición del habla. El CS50 se configura de fábrica

CÓMO USAR SU CS50

con la “Opción predeterminada 1”. Solo presione simultáneamente los botones de programa y volumen durante alrededor de un segundo para desplazarse al siguiente perfil predeterminado. Una luz anaranjada en la parte trasera del CS50 parpadeará 1, 2 o 3 veces, y usted escuchará 1, 2 o 3 tonos agudos para indicar el perfil predeterminado en el que se encuentra.

Nota: También puede usar nuestra Aplicación de personalización en su teléfono inteligente o computadora para asignar uno de los perfiles predeterminados como su perfil base. También puede usar la aplicación para crear su propio perfil personal conforme a sus necesidades específicas. Para conocer más información acerca de la aplicación, vaya a la página 43 (sección de personalización avanzada).

Opción predeterminada 1 – (Ajuste predeterminado de fábrica)
Aumento en el rango de alta frecuencia.

Opción predeterminada 2 – Mayor aumento en el rango de frecuencia en comparación con la opción predeterminada 1 junto con un aumento ligero en las frecuencias de rango medio.

Opción predeterminada 3 – Igual aumento en frecuencias de rango alto y medio que la opción predeterminada 2, pero también con un aumento en el rango de frecuencia baja.

Diríjase a un ambiente relativamente silencioso y durante algún tiempo escuche, con cada uno de los tres ajustes predeterminados, una fuente de sonido como un programa de televisión o una persona hablando. Deberá reajustar el volumen a un nivel cómodo cada vez que seleccione un nuevo ajuste predeterminado. Intente utilizar los tres ajustes predeterminados durante unos cuantos días en situaciones de escucha comunes como conversaciones y mirar el televisor, para determinar el perfil de ajuste predeterminado y de volumen más adecuado para sus necesidades.

El ajuste más adecuado es el que necesite cambiar menos durante el día. Los ajustes automáticos dentro de cada perfil predeterminado deberán poder mantener la comodidad y capacidad de escucha sin tener que ajustar el volumen, excepto en situaciones inusuales.

Cómo acostumbrarse a su CS50

Puede tomar algún tiempo acostumbrarse a la amplificación provista por su CS50. Puede que escuche claramente sonidos que no está acostumbrado a escuchar. Los sonidos ambientales como el roce de papeles, choque de cubiertos y platos pueden distraerle al principio. Su cerebro necesita acostumbrarse a estos sonidos. Durante aproximadamente dos semanas, la incomodidad inicial disminuirá mientras se acostumbra al nuevo espectro de sonidos más definidos y claros que está experimentando.

CÓMO USAR SU CS50

Cómo emparejar con dispositivos Bluetooth

Emparejar su CS50 con un dispositivo Bluetooth como teléfonos inteligentes (smartphones) y computadoras es una simple operación que se realiza una sola vez. Su CS50 buscará e intentará emparejar con los dispositivos Bluetooth durante 3 minutos cada vez que se conecta la batería. Después de ese tiempo, si no se han detectado dispositivos, la unidad dejará de intentar emparejarse y la transmisión Bluetooth se apagará.

1. Asegúrese de que el dispositivo que desea emparejar tiene la función Bluetooth encendida. (Revise las instrucciones del dispositivo para obtener información específica).
2. Conecte una batería cargada al CS50.
3. Observe el dispositivo que intenta emparejar con el CS50 y espere a que se detecte. Deberá aparecer CS50 en la pantalla. Si se le solicita un número de identificación personal (PIN), ingrese "0000".
4. Seleccione CS50 de la lista de dispositivos Bluetooth para asegurar el emparejamiento. El CS50 emitirá un tono cuando la conexión de Bluetooth este lista. Cuando emita dos tonos significa que la conexión de Bluetooth se ha perdido.

Nota: Para mejores resultados, el CS50 deberá encontrarse a una distancia menor a 10 pies (3 metros) del dispositivo Bluetooth.

Cómo contestar llamadas telefónicas

1. Para contestar una llamada telefónica, presione el botón de volumen del CS50. En algunos teléfonos, puede ser necesario seleccionar el CS50 al contestar una llamada.
2. Durante las llamadas telefónicas, puede usar el botón de volumen para controlar el volumen de la llamada. Presiónelo para aumentar el volumen, o manténgalo presionado para disminuirlo.
3. Para colgar, presione el botón de programa del CS50 o finalice la llamada con los controles del teléfono.
4. No presione el botón de programa durante una llamada. La llamada podría interrumpirse.

Nota: Para mejores resultados, coloque el teléfono en el mismo lado del cuerpo que el CS50.

CÓMO USAR SU CS50

Transmisión de audio continua (streaming)

El CS50 está listo para la transmisión de audio continua desde su teléfono inteligente o computadora. El modo A2DP puede desactivarse ya sea usando la aplicación de personalización CS o a través de los menús de medios de audio de su dispositivo. El CS50 alterna automáticamente entre la amplificación personal y la transmisión de audio continua una vez que el reproductor de medios de su teléfono o computadora comienza a transmitir audio, o cambia al teléfono para permitirle responder una llamada entrante. Una vez que la llamada termina o el reproductor de medios es apagado, el CS50 cambia de nuevo a la amplificación personal. Le recomendamos desactivar los tonos de marcación y los sonidos de su teléfono o computadora para reducir la interferencia con la amplificación personal.

Personalización avanzada

Para aún más funciones y opciones para personalizar el desempeño de su CS50, visite **www.SoundWorldSolutions.com**. Aquí podrá descargar gratuitamente la aplicación de personalización del CS50 para smartphones y computadoras. Esta aplicación le permitirá personalizar adicionalmente la configuración de su CS50 a través del enlace Bluetooth.

Bajo la pestaña de “Personalize” de la aplicación puede iniciar un programa automatizado que le guiará a través de los pasos para adecuar el desempeño del CS50 a sus preferencias específicas.

La pestaña “Profiles” le permite seleccionar uno de los tres perfiles predeterminados, o un perfil personal desarrollado por el programa automatizado mencionado anteriormente.

El “Ecualizador” proporciona controles deslizantes para ajustar la configuración individual para las frecuencias altas, medias y bajas para una experiencia de usuario personalizada. También hay un control deslizante para ajustar el volumen, similar al botón de volumen en el CS50.

CUIDADO Y LIMPIEZA



Para mantener el desempeño óptimo de su CS50, por favor tome en cuenta las siguientes precauciones:

- NO permita que caiga agua u otros líquidos sobre o dentro del audífono.
- NO use el CS50 al nadar, bañarse, en exteriores bajo lluvia intensa o en ambientes húmedos.
- NO use el audífono sin acoplar una punta de audífono.
- NO use solventes o líquidos en el CS50.
- NO duerma con el CS50 encendido.
- NO exponga el CS50 o el cargador a la luz solar directa o a calor excesivo.
- Quítese el CS50 al aplicar cosméticos, perfume, loción para después de afeitarse, aerosol para el cabello o cualquier otro producto que pudiera entrar al audífono.
- Quítese el CS50 durante actividades físicas extenuantes, como hacer ejercicio.
- Mantenga el CS50 y el cargador limpios y secos.

Se incluye una herramienta de limpieza con su CS50. Se recomienda utilizar el aro de alambre en el extremo de esta herramienta para eliminar cualquier acumulación de cerilla del audífono y de la boquilla, por lo menos una vez por semana. Limpie las superficies exteriores del CS50 periódicamente con un paño suave y seco. Nunca use solventes o líquidos para limpiar cualquier parte del CS50.

Puede comprar puntas de audífono adicionales y baterías de reemplazo por Internet en **www.SoundWorldSolutions.com** o por teléfono llamando al **1-855-792-0117**.

APÉNDICE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El CS50 no emite sonidos

- Asegúrese de que la batería está conectada correctamente
- Confirme que la batería está cargada
- Quite toda la cerilla que pudiera estar bloqueando el audífono o la boquilla

El sonido se escucha amortiguado o confuso

- Compruebe que la punta del audífono esté montada correctamente en la boquilla
- Quite toda la cerilla que pudiera estar bloqueando el audífono o la boquilla
- Ajuste la configuración del volumen
- Intente un ajuste predeterminado o ambiental diferente
- Si utiliza un auricular Bluetooth, asegúrese de estar a una distancia menor de 10 pies (3 metros) del dispositivo

La batería no carga

- Asegúrese de que el kit del cargador está completamente ensamblado
- Asegúrese de que el cargador está conectado a una fuente de alimentación (la luz indicadora azul está encendida)
- Cerciórese de que la batería está montada correctamente en la estación de carga (la luz indicadora roja está encendida)

El CS50 no está emparejando con mi teléfono

- Asegúrese de que la conexión Bluetooth esté encendida en el teléfono
- Empareje el dispositivo en un lapso de 3 minutos después de encender el CS50
- Asegúrese de seleccionar el CS50 como dispositivo activo en el teléfono
- Use el CS50 a una distancia menor a 10 pies (3 metros) del teléfono

APÉNDICE

GARANTÍA

Garantía Limitada

Sound World Solutions reparará o, a su criterio, reemplazará cualquier Amplificador de Sonido Personal Bluetooth CS50 (el “Producto”) si en opinión de Sound World Solutions tiene defectos en materiales y/o mano de obra. Esta garantía limitada tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de compra por el usuario final del Producto (el “Cliente”). La responsabilidad de Sound World Solutions se limita al costo de la pieza o piezas afectadas. Todos los costos de envío, impuestos y otros costos son responsabilidad exclusiva del Cliente.

Esta garantía se hace únicamente al Cliente y no es transferible. Para hacer una reclamación de garantía, el Cliente debe proporcionar una prueba de compra a Sound World Solutions, y después recibirá una Autorización de Devolución de Mercancía (*RMA, Return Merchandise Authorization*) y enviará el producto a Sound World Solutions. Después de la recepción, Sound World Solutions inspeccionará el Producto en sus instalaciones en busca de los defectos reclamados y, si se determina que el producto estaba defectuoso al realizar la compra, Sound World Solutions lo reemplazará o reembolsará el precio de compra en un plazo de 30 días. Las piezas de repuesto o productos se garantizan únicamente durante el periodo de garantía original. Sound World Solutions no realizará reembolsos o canjes algunos sin autorización previa.

GARANTÍA

Exclusiones

Esta garantía limitada: Cubre únicamente el Producto y su conjunto de baterías, y no cubre ningún otro accesorio, producto o servicio; sólo surte efectos si se siguen las Instrucciones de Uso Recomendadas y el Producto se utiliza adecuadamente y sólo para el fin para el cual fue diseñado; no cubre daños que Sound World Solutions determine que han sido causados por el desgaste normal, por un mal uso o por usar el Producto para un fin diferente para el cual fue diseñado; no cubre ninguna inconformidad, daño o defecto atribuible a la modificación o reparación de Productos no autorizada por Sound World Solutions y no cubre daños causados por accidentes, desastres naturales o fuerza mayor, negligencia o mal uso intencional, alteración o daño, o cualquier Producto que no haya sido manejado, almacenado o utilizado adecuadamente después de entregarlo al Cliente.

Garantía exclusiva

Esta Garantía limitada es la garantía exclusiva de Sound World Solutions respecto al Producto. Esta garantía no podrá modificarse, alterarse o enmendarse y Sound World Solutions no autoriza y no estará obligada por ninguna otra garantía o declaración respecto al Producto por sus representantes, empleados, agentes u otros. ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. SOUND WORLD SOLUTIONS NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA RESPECTO AL PRODUCTO, Y RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN EN PARTICULAR.

APÉNDICE

GARANTÍA

Limitación de responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia Sound World Solutions tendrá responsabilidad u obligación alguna en absoluto por daños derivados, indirectos, imprevistos, especiales o punitivos, incluidos daños por pérdidas de ingresos, daños a la propiedad o lesiones personales (incluida la pérdida de consorcio familiar), ya sea con base en contratos, agravios (incluyendo negligencia y responsabilidad estricta) o de cualquier otro modo. La única obligación de Sound World Solutions y el único recurso del Cliente estarán limitados a la reparación o reemplazo del Producto defectuoso con sujeción a los términos de esta garantía limitada.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UNA JURISDICCIÓN A OTRA. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS IMPREVISTOS O DERIVADOS, POR LO QUE LAS EXCLUSIONES ANTERIORES PODRÍAN NO SER APLICABLES PARA USTED.

Resolución de disputas

SOUND WORLD SOLUTIONS Y EL CLIENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO RENUNCIAN DE MANERA ABSOLUTA, IRREVOCABLE E INCONDICIONAL, EN LA MAYOR EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, A TODO DERECHO A UN JUICIO POR JURADO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN O CAUSA DE ACCIÓN CON BASE EN O COMO RESULTADO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EN CUALQUIER ACCIÓN, PROCEDIMIENTO O LITIGIO DE CUALQUIER TIPO ENTABADO POR SOUND WORLD SOLUTIONS O EL CLIENTE CONTRA EL OTRO, YA SEA CON RESPECTO A RECLAMACIONES CONTRACTUALES, RECLAMACIONES POR AGRAVIOS O DE OTRO TIPO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 **Advertencia:** Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no quite la tapa. No hay piezas en el interior que el usuario pueda reparar. Todo tipo de mantenimiento debe ser realizado por personal de servicio calificado.

 **Advertencia:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia o a la humedad. El CS50 no deberá exponerse a gotas o salpicaduras. No deberá colocar ningún objeto lleno de líquido sobre el CS50.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No obstruya los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instálelo cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o perforado, especialmente en las clavijas, tomas de corriente y el punto donde sale del aparato.
10. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante periodos prolongados de tiempo.
11. Todo tipo de mantenimiento debe ser realizado por personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato haya sufrido daños en cualquier manera, como daños al cable de alimentación o a la clavija, derrame de líquidos o caída de objetos dentro del aparato, si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, no funciona normalmente o se ha dejado caer.

APÉNDICE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Bluetooth

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de tales marcas por Sound World Solutions se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

⚠ Advertencias generales

Si usted tiene o cree tener cualquiera de los siguientes síntomas, no use este producto hasta haber consultado con un médico:

- Historial de acumulación excesiva de cerilla
- Dolor o incomodidad en el oído
- Escurrimiento de líquidos o exudado del oído en los pasados 90 días
- Bloqueo del canal auditivo, una infección del oído prolongada o una sensación de taponamiento
- Deformidad visible del oído
- Pérdida auditiva repentina, de avance rápido o fluctuante durante los pasados 90 días
- Dificultad auditiva crónica
- Zumbido únicamente en un oído
- Pérdida auditiva en sólo un oído que ha empeorado en los pasados 90 días
- Periodos de mareo agudo o crónico

Los marcapasos y desfibriladores pueden ser sensibles a los campos magnéticos. No coloque el audífono CS50 o las baterías en un bolsillo de su camisa o cerca de su marcapasos o desfibrilador.

Mantenga todas las piezas del audífono y el kit del cargador del CS50 lejos de niños menores de 3 años de edad. Estos componentes contienen piezas pequeñas que pueden presentar un riesgo de asfixia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Información de la reglamentación de Industry Canadá

El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia dañina y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pudiera causar el funcionamiento no deseado del dispositivo. Revisar RSS-GEN 7.1.5.

Nota de la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos de los EE.UU.) sobre amplificadores de sonido personales (PSAP)

Los PSAP están diseñados para amplificar el sonido ambiental para consumidores sin impedimentos auditivos. No pretenden compensar un impedimento auditivo. Algunos ejemplos de situaciones en las cuales los PSAP se utilizan normalmente incluyen la caza (escuchar a las presas), observación de pájaros, escuchar conferencias con un orador lejano, y escuchar sonidos suaves que pueden ser difíciles de escuchar (por ejemplo, conversaciones distantes, actuaciones o representaciones teatrales). Debido a que los PSAP no están diseñados para diagnosticar, tratar, curar o mitigar enfermedades y no alteran la estructura o función del cuerpo, no son dispositivos definidos en la *Food, Drug and Cosmetic Act* (Ley de Alimentos, Fármacos y Cosméticos). Como tal, no existe una clasificación reglamentaria, código de producto o definición para estos productos. Además, no hay requisitos para el registro de fabricantes y el listado de estos productos con la FDA.

Sin embargo, los PSAP están sujetos a las disposiciones aplicables de la *Radiation Control for Health and Safety Act* (Ley de Control de Radiación para la Salud y la Seguridad) de 1968, bajo la cual la FDA regula productos electrónicos que emiten vibraciones sonoras, como equipo de amplificación de sonido. (Revise también 21 CFR 1000.15.) Los fabricantes de los PSAP deben reportar defectos y eventos adversos y llevar a cabo otras medidas descritas en 21 CFR Parte 1003. Los fabricantes de los PSAP también deben cumplir los requisitos para la recompra, reparación o reemplazo de productos electrónicos como los dispone el 21 CFR Parte 1004.

APÉNDICE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Información de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no podrá causar interferencia dañina y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que podrá provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró en cumplimiento con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente a aquel donde está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio y TV experimentado para obtener ayuda.

No se permite a los usuarios modificar o hacer cambios al dispositivo de ninguna manera. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Sound World Solutions podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



Sound World Solutions

960 N. Northwest Highway
Park Ridge, IL 60068-2358
USA

847-939-6101

Para comunicar con el Servicio a Clientes o Soporte
Técnico: Marque el 855-792-0117 sin costo en los EUA

SoundWorldSolutions.com